


Инструкция

Устройство предназначено для проверки светопропускания линз, защиты от ультрафиолета и синего спектра света. Имеет гистограммную и цифровую модель отображения, интуитивно понятную и простую для чтения.

1.ВНЕШНИЙ ВИД.

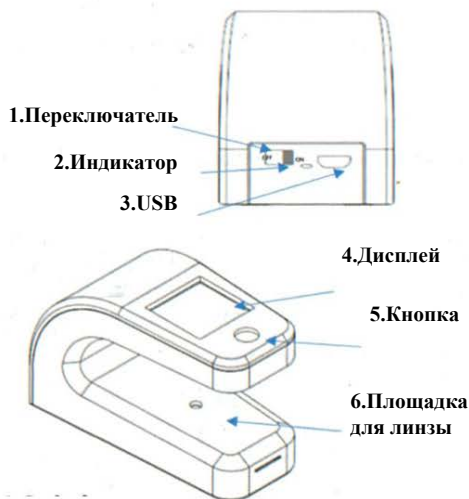

1.Переключатель.
Включение устройства-положение -ON
Выключение устройства положение - OFF

2.Индикатор.

Индикатор зарядки.Крысний-зарядка. Зеленый - заряжено.

3.USB

Внешний интерфейс питания-зарядки

4.Дисплей.

Отображение результатов измерения.


5.Кнопка

Кнопка активации измерения.

6.Площадка для линзы.

Место установки линзы передней поверхностью вниз.



2.ИЗМЕРЕНИЕ.

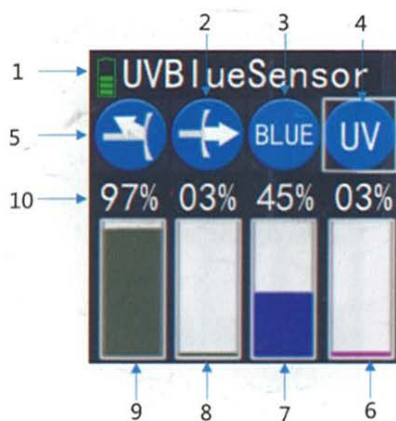

- 1.Заряд батареи
- 2.Иконка пропускания
- 3.Синий спектр света
- 4.Ультрафиолетовый спектр света
- 5.Иконка отражения
- 6.Значок коэффициента пропускания ультрафиолетового излучения
- 7.Значок коэффициента пропускания синего спектра света
- 8.Гистограмма коэффициента пропускания
- 9.Гистограмма коэффициента отражения
- 10.Числовые результаты тестов (%)


Автокалибровка.

При включении прибора запускается процесс автокалибровки сенсора синего спектра света(Blue Adjust) и сенсора ультрафиолетового спектра света.(UV Adjust)

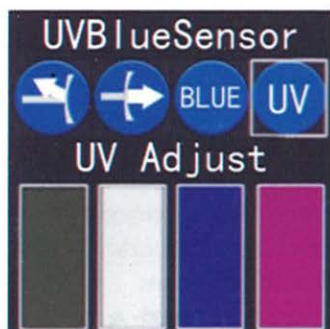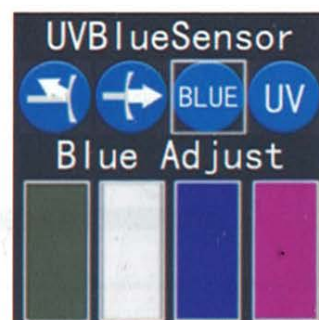


Измерение.

1.После завершения процесса автокалибровки нажмите на кнопку активации измерения.

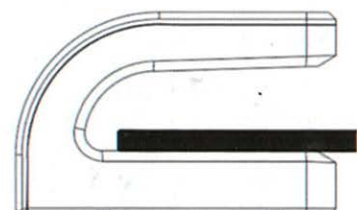

2.После появления надписи **Place Len.** установите линзу на столик для измерения

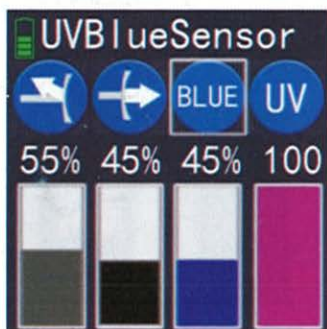

3.Нажмите на кнопку активации измерения повторно,и дождитесь срабатывания 2 сенсоров (3 секунды не трогайте измеряемую линзу)

Погрешность измерения составляет +/- 5%

Длина волны синего света	425nm
Длина волны UV излучения	400nm
Разрешение дисплея	240X240
Емкость АКБ	400mAH

Комплект поставки:
Устройство VISBLUE - 1шт
Кабель зарядки - 1шт

